


腰椎の骨密度を計りたいけど設置場所が…


設 置 性 に 優 れ た

DXA装置があります!!

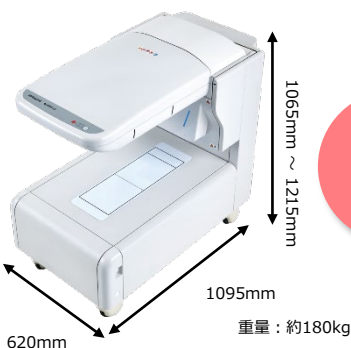

富士フィルムヘルスケアの腰椎・大腿骨DXA装置はベッド分離型のコンパクトタイプ。
一般撮影室、CT室、XTV室などのわずかなスペースに設置が可能です。


従来の腰椎大腿骨骨密度測定装置

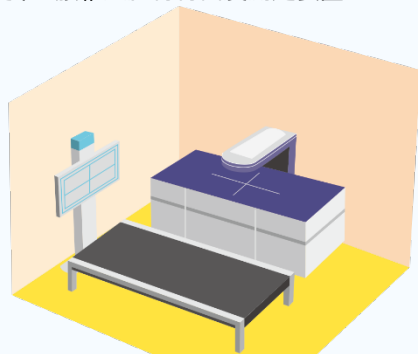

一体型の場合は空きスペースがほとんどない

富士フィルムヘルスケアの腰椎大腿骨骨密度測定装置

富士フィルムヘルスケアなら
既存の撮影台に組み合わせ
可能で、省スペース!!

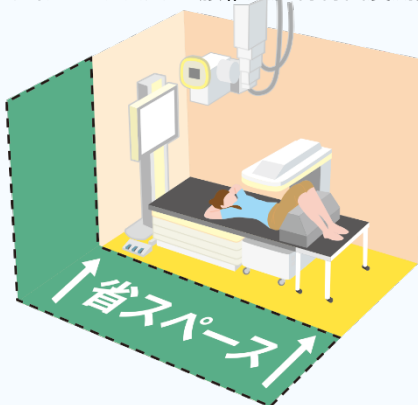

一般撮影装置との組み合わせ例



簡易型一般撮影室でのレイアウト例

診療報酬は他の部位の骨密度測定と比較して最も高額なため、医療機関様の経営に寄与します。

	腰椎・大腿骨DXA法 (ALPHYS LF)	前腕DXA法 MD法	超音波法
診療報酬 (D217)	腰椎360点 同日大腿骨測定+90点	140点	80点



装置の概要はこちらの動画をご参照ください。

富士フイルムヘルスケアの骨密度測定装置 ALPHYS LF

ポイント 1

様々な撮影台の組み合わせ

ALPHYS LF は、設置の高さ調節が可能であり、**X線撮影装置**や市販の撮影台を組み合わせ、使用可能です。



撮影台組み合わせ例



ポイント 2

スループットの良さ

ALPHYS LF は、X線撮影装置の撮影台と組み合わせるので、**腰椎のレントゲン撮影からそのまま骨密度測定が可能**です。

撮影時間は、標準モードで腰椎40秒、大腿骨20秒です。
測定モードは標準のほかにも高精度と高速も搭載しています。

腰椎
測定

DCS-900EX 約90秒

ALPHYS LF 約40秒 ※標準モード

大腿骨
測定

DCS-900EX 約90秒

ALPHYS LF 約20秒 ※標準モード

ポイント 3

ガイドラインに準じた高い診断性能を提供

※最新の診断基準に準拠

ALPHYS LF 1台で骨密度測定で重要視される測定部位に対応しております。

参考：骨粗鬆症の予防と治療ガイドライン2015年版

腰椎測定

腰椎の前弯を是正します。



大腿骨測定

前捻角を補正します。



前腕測定



※前腕測定キットはオプションです。

ポイント 4

電子カルテと骨密度測定装置のシームレスな連携で患者満足度アップに貢献!



受付 / 電子カルテ

Hi-SEED W3EX



電子カルテで入力した“患者属性データ”が
骨密度測定装置に自動電送

※富士フイルムヘルスケアシステムの電子カルテHi-SEED W3EXのみの
対応です。

患者属性データ
自動送信



検査室 / X線骨密度測定装置

腰椎大腿骨用
ALPHYS LF



骨密度測定装置での患者登録が不要なので
スピーディーに測定可能!

FUJIFILM

富士フイルムヘルスケア株式会社

〒107-0052 東京都港区赤坂九丁目7番3号
<https://www.fujifilm.com/fhc>

◆ALPHYSは、富士フイルムヘルスケア株式会社の登録商標です。
◆Hi-SEEDは富士フイルムヘルスケアシステムズ株式会社の登録商標です。
◆仕様及び外観は予告なく変更されることがあります。
◆装置を正しく使用する為に必ず「取扱説明書」、「電子化された添付文書」をお読みください。
◆構成品の医療機器承認番号、医療機器認証番号については、個別製品仕様書を参照願います。
◆本機器は、特定保守管理医療機器、設置管理医療機器に該当する医療機器です。
◆本医療機器の販売・貸与には販売業・貸与業の許可が必要です。
◆このカタログはオプションの機能・製品が含まれています。詳細は当社営業担当にお尋ねください。
販売名：X線骨密度測定装置 ALPHYS LF
医療機器認証番号：第230AABZX00024000号