

「高精細な診断画像」を、もっと自由に。

iViz air V

-Ver.5-

Convex

動物用超音波画像診断装置



製品特徴



連続スキャン時間



高速起動



ワイヤレス



6.1インチ
タブレット



動画保存時間
／画像保存枚数



有線／無線両用



ワイヤレスで機動的

軽量でありながら20秒の高速起動かつ長時間バッテリーで畜舎や野外などの様々なシーンで活躍。



豚舎での妊娠鑑定の様子

感染リスクにも配慮

ワイヤレス仕様でプロブカバー*を被せての操作も可能。

*プロブカバーは使用者様ご自身でご用意ください。




小型でありながら 高画質を実現

画像処理アルゴリズム「Clear visualization plus」を搭載*


*富士フィルムがX線画像で培った画像処理技術を応用して超音波に特化させた画像処理アルゴリズム




17日目 不明

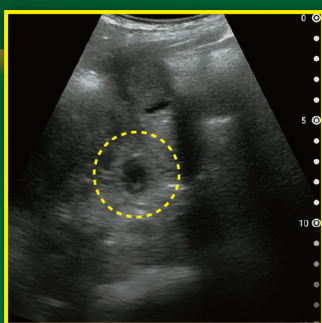


20日目 受胎

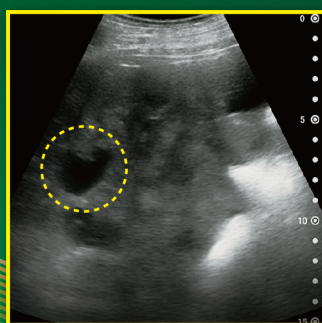


21日目 受胎

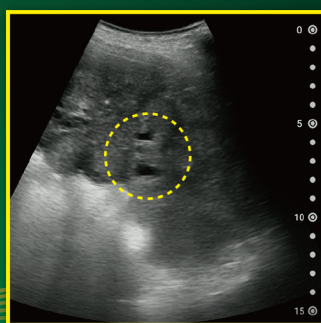


21日目 受胎

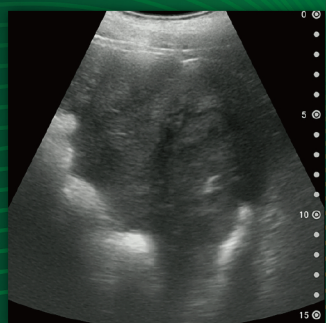

22日目 不受胎

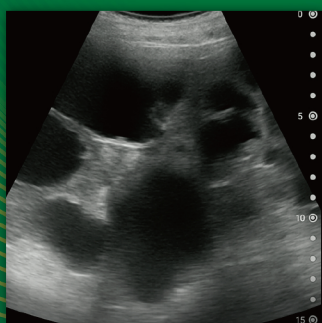

28日目 受胎

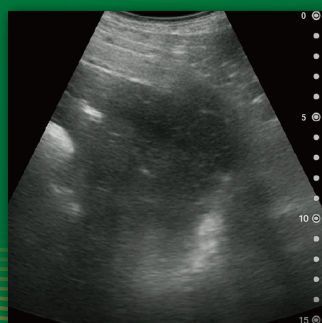

28日目 不受胎

監修：
千葉県農業共済組合北部家畜診療所
五島 可祥 先生

iViz air V Convex

製品構成	・タブレット表示器 ・タブレット用AC充電アダプタ	・FWT C5-2 Vコンベックスプローブ ・プローブ用AC充電アダプタ	・タブレットプローブ間通信ケーブル
主な仕様		タブレット	
表示モード	Bモード	名称	タブレット表示器
アプリケーション	マルチビュー機能、DICOM機能	寸法	約70(幅) × 約152(高さ) × 約8.0(奥行き) mm
出力形式	静止画:PNG、JPEG、DICOM(オプション) / 動画:MP4	重量	約158g
起動時間	20秒以下*1	プローブ	
走査方式	コンベックス走査	名称	FWT C5-2 Vコンベックスプローブ
バッテリー充電時間	完全放電から4時間以内	寸法	約72.8(幅) × 約178.5(高さ) × 約29.0(奥行き)mm
バッテリー動作可能時間	3時間以上(連続スキャン時間)*2	重量	約190g
		周波数帯域	2～5MHz

*1 プローブ電源OFF、タブレットスリープ状態から、プローブ電源ボタン押下でタブレットスリープ解除、アプリを立ち上げ、Bモード画面が表示されるまでの時間。ただし電圧状態は良好なものとする。

*2 新品のバッテリー、常温、デフォルト設定、バッテリーフル充電状態の場合。

※ 製品には汎用のタブレット表示器を使用しているため、外観や仕様等が予告なく変更されることがあります。

※ 付属のケーブルでタブレットとプローブを接続し、有線で使用することも可能です。

注意

- 外観・仕様は、改良のため予告なく変更することがあります。● 詳細な仕様については、弊社にお問い合わせください。
- ご使用に関しては、製品添付の取扱説明書をお読みください。

動物用超音波画像診断装置 iViz air V

販売名:FWU Vシリーズ クラス分類:一般医療機器(動物用) 届出番号:3動薬第3032号

iVizは、FUJIFILM Sonosite, Inc.の商標です。Wi-Fiは、Wi-Fi Allianceの商標または登録商標です。

*本品は豚の妊娠鑑定だけでなく、獣医師による超音波画像診断全般にもご利用いただけます。

FUJIFILM

製造販売業者

富士フィルム株式会社

販売業者

富士フィルム VETシステムズ株式会社

〒181-0013 東京都三鷹市下連雀3-35-1 ネオ・シティ三鷹12F

iViz air コールセンター:0800-888-8806 受付時間 9:00~18:00(平日)

販売業者